

Rev. 00
Giugno 2015

 RehaMED

Scheda tecnica

VIRGO II

KIT ANTIDECUBITO COMPLETO DI
COMPRESSORE E MATERASSO

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali

Codice	Descrizione
AK-506	Kit antidecubito VIRGO II completo di compressore con regolatore e materasso a elementi intercambiabili
AK-506C	Compressore con regolatore
AK-506M	Materasso ad elementi intercambiabili


Indicazioni	
Produttore	Intermed Srl
CND	Y033306 (AK-506 e AK-506M) Y033399 (AK-506C)
Repertorio	1307602/R (AK-506) 1307617/R (AK-506C) 1307721/R (AK-506M)
Conformità	Dispositivo Medico di classe I conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Prevenzione delle lesioni da decubito per pazienti allettati allo scopo di diminuire i picchi di pressione e di ridurre le forze di taglio e frizione.

Descrizione

Kit composti da compressore con regolatore VIRGO II, materasso a 20 elementi intercambiabili con cinghie di fissaggio, telo di copertura a cerniera su tre lati, tubi a tre vie con connettori CPC per il gonfiaggio e sistema CPR per procedure d'emergenza.

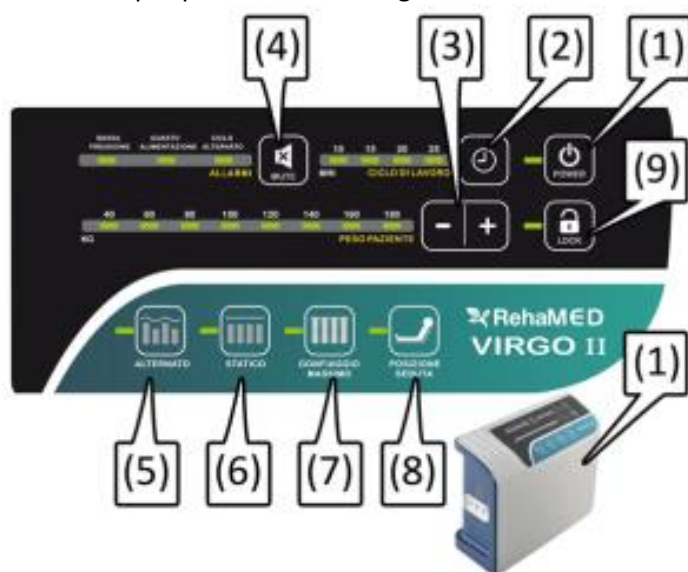

1. Tasto di accensione [Power]
2. Tasto Regolatore ciclo di lavoro
3. Tasto Regolatore della pressione di lavoro
4. Tasto Spegnimento allarme
5. Tasto Funzione ciclo alternato [Alternato]
6. Tasto Funzione statica [Statico]
7. Tasto Gonfiaggio massimo [Gonfiaggio massimo]
8. Tasto Funzione Posizione seduta
9. Tasto Blocco [Lock]

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Caratteristiche tecniche

Compressore - Codice: AK-506C	Materasso - Codice: AK-506M
Tensione di alimentazione: 220 V - 50 Hz	Dimensioni: 203 x 88 x 20 cm
Fusibili: 1 da 1A	Valvola CPR
Portata d'aria: 7-8 litri al minuto	Sistema di trasporto
Pressione: 20-55 mmHg	Connettori a sgancio rapido
Ciclo lavoro: 10/15/20/25 minuti	Con perdita d'aria
Tenuta massimo gonfiaggio	20 elementi
Allarme: bassa pressione - mancata alimentazione - ciclo alternato bloccato	Fodera materiale in bi-elastico
Ciclo alternato - ciclo statico – Ciclo posizione seduta	Elementi in PU
Dimensioni: 31 x 12,5 x 21 cm	Base vinilica
Peso: 2,5 kg	
Classe II Tipo BF	
Potenza assorbita: 12 W	

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Dopo avere posizionato il materasso e prima di stendere il paziente sul letto controllare che l'altezza complessiva non risulti eccessiva. Qualora ciò si verificasse si consiglia di utilizzare un materasso con altezza inferiore.

Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Manutenzione e pulizia

Pulire con panno umido e disinfettanti non aggressivi. Non usare abrasivi ed oggetti appuntiti o taglienti. Dispositivo non autoclavabile.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione.

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142